

血糖測定に必要なもの

■測定器：アキュチェックアビバナノ

■試験紙：アキュチェックアビバストリップ



■穿刺器具


■ランセット (針)

お使いのものを準備してください。

※製品及び製品の包装デザインは予告なく変更することがあります。

電池の交換

電池マークが表示されたら、電池の交換時期です。

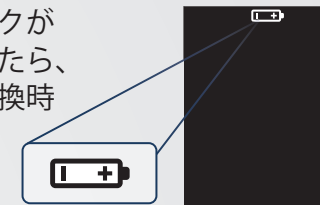

アキュチェックアビバナノに使用する電池は

CR-2032

2個です。



1 裏面の電池ボックス引き出し口を引っ張り電池ボックスを取り出します。



2 新しい電池の- (マイナス) の面を上にしてセットして、電池ボックスを元の位置に戻します。



日付・時刻の確認・設定 (電池を交換した際に必要です。)

〈「Set-up」表示にする〉

日付・時刻の変更の必要がなく、設定画面を終了する場合は、電源ボタンを4秒以上押し続けてください。

通常の測定用の画面に戻ります。


1 ①電源ボタンを押す
②日付・時刻と試験紙マークの表示
③電源ボタンを4秒以上押す



2 日付・時刻と「Set-up」が点滅表示される



3 現在の時刻になっているか確認し、 ボタンで調整する

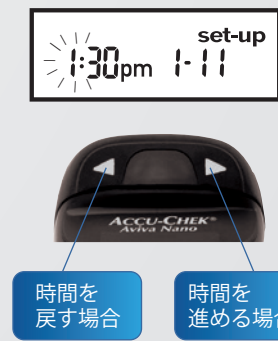


4 電源ボタンを押して時間を確定する




5 続いて「分」が点滅する。同様に で調整し、電源ボタンで確定する



6 am/pmを で選択し、電源ボタンで確定する

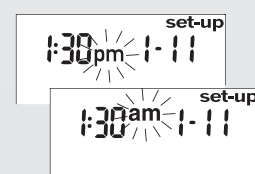

7 月、日、年も同様に確認・設定する

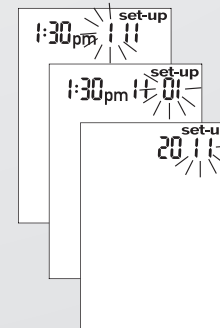

〈終了〉

8 ①電源ボタンを4秒以上押す
②試験紙マークの表示
③もう一度電源ボタンを押し電源を切る





アキュチェックアビバ ナノ画面メッセージ表

※代表的な原因と対処方法を記載しています。
詳細は取扱説明書の「画面メッセージと対処方法」をご確認ください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
測定器の電源が入らない 又は画面になにも表示 されない	“set-up”が表示される	試験紙マークが表示される	試験紙マークと 血液マークが表示される	“HI”が表示される	“LO”が表示される	測定結果と一緒に “1”が表示される	“---”と“code”が 表示される	“E-1”と試験紙マークが 表示される	“E-2”と“code”が 表示される
電池が切れています。 －新しい電池に交換して ください。 画面が故障しています。 測定器が故障しています。 －ロシュにハローお客様 センターへお問い合わせ ください。 周囲の気温が高すぎるか、 低すぎます。 －適度な気温の場所に移 動してください。	設定モードです。 －各種の設定作業が行え ます。 －画面を終了したい場合 は、電源ボタンを4秒 以上押して、画面に試 験紙マークが出たら再 度電源ボタンを押して ください。	測定器の準備が整ってい ます。 －測定を行う場合は試験 紙を差し込んでください。	測定の準備が整っています。 －血液又はコントロール 液を試験紙につけてく ださい。	測定結果が600 mg/dL を超えています。 －すみやかに医師の指示 に従ってください。	測定結果が10mg/dLを 下回っています。 －すみやかに医師の指示 に従ってください。	測定結果が、設定した低 血糖レベルを下回ってい ます。	コードキーが差し込まれ ていません。 －測定器の電源を切り、 コードキーを再度差し 込んでください。	試験紙に問題が起きました。 －新しい試験紙をご使用 ください。 試験紙の差し込み方が間 違っています。 －試験紙の差し込み方向 を確認して入れ直してく ださい。 ▲試験紙が湿気やアルコール 等を吸い込んだり、試験紙 の金属部分に傷ができるこ と等により、試験紙に問題 が起きます。	間違ったコードキーが差し 込まれています。 －試験紙容器に記載のコ ード番号とコードキーの番 号があっているかを確認 ください。 ▲間違ったコードキーとはア キュチェックアビバナノ用 のものではないコードキー を指します。
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
“E-3”が表示される	“E-4”と血液マークが 表示される	“code exp”が表示される	“E-5”と“code exp”が 表示される	“E-6”と試験紙マークと 血液マークが表示される	“E-7”が表示される	“E-8”と温度計マークが 表示される	電池マークが表示される	“E-9”と電池マークが 表示される	“E10”が表示され、 日付・時刻が点滅する
測定中にエラーが発生し ました。 －新しい試験紙で測定し 直してください。	血液又はコントロール液 の量が少なすぎました。 －新しい試験紙で測定し 直してください。 ▲ゴマ粒大の血液を出して試 験紙の先端から、黄色の血 液吸引部が血液で赤く満た されるまで血液を吸引させ てください。	本エラーは黒いコードキー をご使用の場合、使用期限が 切迫しても表示されません。 使用期限は試験紙容器で 確認ください。 ご使用中の試験紙の使用 期限が切迫しています。 (使用期限の終了月にな ると表示されます。) －使用期限が過ぎる前に新し い試験紙をご用意ください。 ▲測定器の時刻と日付が合っ ていることをご確認ください。 ▲古いコードキーが差し込まれ ていないかご確認ください。	本エラーは黒いコードキー をご使用の場合、使用期限 が過ぎても表示されません。 使用期限は試験紙容器で 確認ください。 ご使用中の試験紙の使用 期限が過ぎています。 －新しい試験紙をご用意 ください。 ▲測定器の時刻と日付が合っ ていることをご確認ください。 ▲古いコードキーが差し込まれ ていないかご確認ください。	血液又はコントロール液を つけるのが早すぎました。 (血液マークが画面に表示 される前に血液又はコント ロール液をつけました。) －新しい試験紙で測定し 直してください。 ▲画面に試験紙マークと血液 マークが表示されるのを確 認してから測定を行って ください。	電子回路のエラーが発生 しました。 －測定器の電源を一旦 切って、入れ直してくだ さい。 －電池を取り出して数秒 待ち、再度セットして、 電源を入れてください。 上記のことを行っても同じメッ セージが表示される場合は、 ロシュにハローお客様セン ターへお問い合わせください。	気温が測定器の許容範囲 (8～44℃)外です。 －8～44℃の場所に移 動して5分後にもう一 度測定してください。 測定器を人為的に温め たり冷やしたりしないで ください。	電池が切れかけています。 －すぐに電池を交換して ください。	電池切れです。 －すぐに電池を交換して ください。 ▲何らかの影響によって一時 的に電池の性能が低下して いる場合があります。この ような疑いのある場合は セットされている電池を一 旦取り出して、再度セット してみてください。 繰り返し表示されるよう でしたら、電池を交換して ください。	時刻と日付の設定が正し くない可能性があります。 －時刻と日付が正しいか ご確認ください。必要 であれば調整してくだ さい。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社

血糖自己測定 (SMBG) ・本製品へのお問い合わせはフリーダイヤルへ
24時間 365日 ※平日18:00～翌日8:30 / 土日祝日は、サービス内容が限られます

ロシュにハロー
0120-642-860

ACCU-CHEK®